

DRETEC



ボディスケール「グラッセ LED」  
BS-160  
家庭用

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

輸入元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00, 祝祭日および当社指定休日を除く)

## 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
- ご使用上に生じる外観の変化。
- ※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合
- ※本保証書のご提示がない場合。
- ※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

お買い上げ年月日


お買い上げ店

お名前

ご住所

お電話番号

## 各部の名称

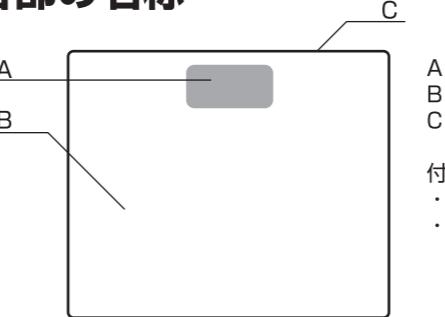

- A: 表示部  
B: 本体（測定台）  
C: 電池カバー（裏側）
- 付属品  
・取扱説明書  
・動作確認用電池（単4形乾電池×4個）  
(付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります)

### ●製品仕様

品 番	BS-160
本体寸法	約 幅297×奥行245×高さ23mm
質 量	約1309g
最大計量	150.0kg
計量範囲	5.0～150.0kg
最小表示	0.1kg
電 源	DC6V（単4形乾電池×4個）
消費電流	約38mA以下
電池寿命	約1年（1日3回測定した場合、室温20℃±5℃）

## 計量精度

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた体重に対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

（使用場所の温度20℃±5℃の場合）

はかる重さ	精度
5～75kg以下	±0.2kg
75kg超え150kg以下	±0.3kg

- 本製品は家庭で使用するために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

- 日本の各地域の重力値には若干の差があります。高精度のはかりは、この影響により誤差が発生することがあります。

## 精度を保つためには


- 本製品は精密に作られています。良い状態を保つために次のことをよく守ってください。

- 使用する場所と保管する場所  
1) 直射日光の当たる場所や暖房器具などの熱風が直接当たるところには置かないでください。  
2) 温度変化の激しいところでの使用は避けてください。  
3) 湿気の特に多い場所や水気のある場所には置かないでください。  
4) 振動の激しいところに保管しないでください。  
5) 上に物をのせたまま保管しないでください。  
6) 長い間お使いにならない場合は電池を抜いてから保管してください。

## 安全上のご注意



### 警告

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

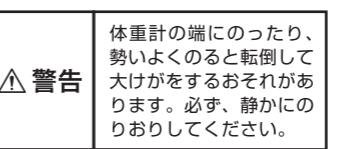


△ 警告

体重計の端にのったり、勢いよくのると転倒して大けがをするおそれがあります。必ず、静かにのりおりしてください。

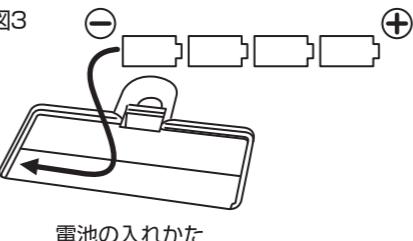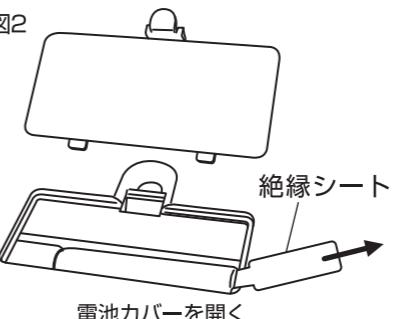

### 注意

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。

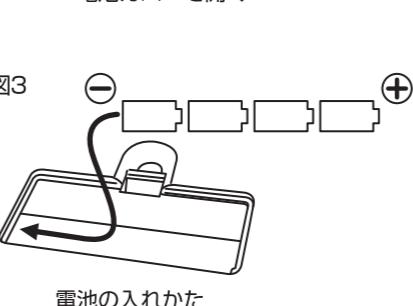

- 体重計は平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- 入浴後に濡れた体で体重計にのらないでください。滑って転倒し大けがをするおそれがあります。また、本体が濡れると故障の原因となります。
- 持ち運びには注意してください。特にお子様などには持ち運びをさせないでください。落として大けがをするおそれがあります。
- 本製品に重いものを落としたり、かたいものにぶつけたり落としたりすると、破損し破片が飛び散り大けがをするおそれがあります。
- 電池の交換時に極性（+・-）の方向を間違わないように注意してください。液漏れや破損のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- 高温になる場所に置かないでください。機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。また、ストーブなどの加熱器具の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
- ご使用にならないときは本製品の上に物をのせないでください。
- 湿気や磁気の多い場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。故障の原因になります。

### 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、自に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合にはお住まいの自治体の指示に従ってください。

### 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。  
電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
  - ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。