



HK-201

初めてでも使いやすい
ミストタイプでやさしく洗い流す

鼻用洗浄器

クリーンリフレッシュ

コンパクト



製品特徴

ミストタイプだから
初めての方にも

3段階の噴霧量切替

シリコンヘッドで
鼻にやさしい

使い方


洗浄水を作る

精製水 200ml に対して
精製塩約 1.8g を入れてよく混ぜる。




洗浄水をセット

洗浄水をタンクに入れ、タンク蓋を取り付ける。

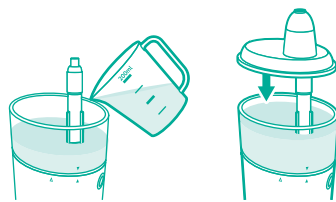

鼻腔を洗浄

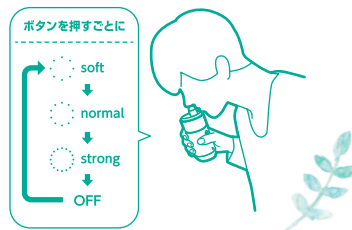

販売名	鼻用洗浄器HK-201	充電時間	約4時間(空の状態から満充電まで)	使用環境温湿度	温度: 5~40℃ 湿度: 30~90%RH 結露なきこと
一般的名称	鼻用洗浄器	寸法	約幅52×奥行63×高さ153mm	輸送および保管環境温湿度	温度: -10~60℃ 湿度: 30~90%RH 結露なきこと
品番	HK-201	質量	約197g	防水仕様	IPX7 ※1
医療機器区分	一般医療機器	流量	soft : 13±4ml/30秒 normal : 16±4ml/30秒 strong : 19±4ml/30秒	動作回数	満充電で約60回(1回2分、strongモードで使用の場合)
医療機器届出番号	11B2X10023000004	タンク容量	約45ml	付属品	ノズルヘッド2個 充電用ケーブル1本、洗浄用ブラシ1個
入力	DC5V 1A				
内蔵電池	充電式リチウムイオン電池 3.7V 1400mAh				

※1 IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。



株式会社ドリテック
<https://www.dretec.co.jp>

東京 〒110-0005
支店 東京都台東区上野 6-16-17
上野昭和通ビル 9F
TEL 03-5846-5203
FAX 03-5846-5209

大阪 〒532-0011
支店 大阪府大阪市淀川区西中島 5-11-10
第3中島ビル 8F D室
TEL 06-6755-9488
FAX 06-6755-9477

HPIはこちら

